

AVISO IMPORTANTE

Aviso N.º : A347
Ref. FCO : 20000304025
Data : 9 de Março de 2011

São registadas MU incorrectas após a selecção de **Confirm or Unconfirm Settings** (Confirmar ou desconfirmar definições)

Caro cliente,

Vimos por este meio fornecer-lhe algumas informações importantes sobre o funcionamento do seu equipamento. Aconselhamos todos os utilizadores do equipamento a seguirem as instruções e as recomendações indicadas neste Aviso.

Este documento deve ser incluído na secção Aviso Importante do manual de Instruções de Utilização do XVI R4.5 (1010070) e substitui o Aviso Importante A339. O Service Pack 2 do Desktop Pro™ R7.01 dispõe da solução para o problema descrito neste Aviso Importante.

Este Aviso do Utilizador é aplicável ao XVI R4.5 no modo não SYNERGISTIQT™ com o Desktop Pro™ R7.01.

Ao clicar em **Confirm Settings** (Confirmar definições) na caixa de diálogo **Preset Selection** (Predefinir selecção) no XVI, o XVI envia o ângulo inicial da gantry para o Desktop Pro™.

Se clicar em **Confirm or Unconfirm Settings** (Confirmar ou desconfirmar definições) durante a fase de **Terminated Checking** (Verificação interrompida) do tratamento, o Desktop Pro™ cancela o feixe carregado e define os feixes MU para zero. Em seguida, o Desktop Pro™ envia as MU administradas para o MOSAIQ® como um valor zero.

Consequentemente, é apresentado um aviso no MOSAIQ® (ver Figura 1) que lhe solicita, erradamente, que aplique um tratamento de radiação parcial com as restantes MU.

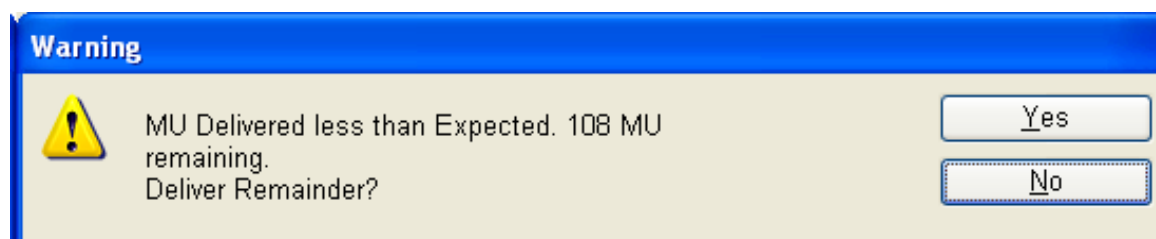


Figura 1: caixa de diálogo de aviso

Se clicar em **Yes** (Sim), o MOSAIQ® envia novamente a totalidade dos MU prescritos para o Desktop Pro™. Esta situação pode originar um tratamento inadequado.

Se clicar em **No** (Não), é apresentada uma caixa de diálogo de **Information** (Informação) no MOSAIQ® (ver Figura 2). Clique em OK e o MOSAIQ® não registará as MU administradas. Será então necessário registar manualmente o tratamento e as MU administradas no MOSAIQ®.

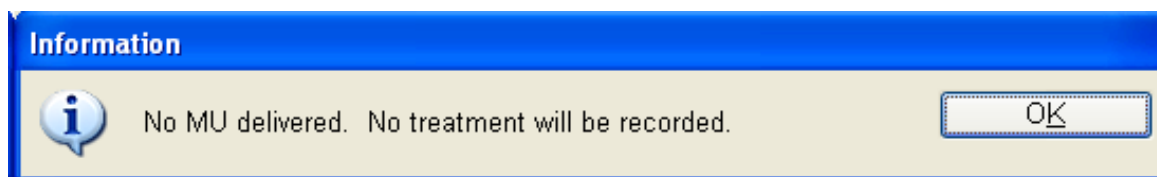


Figura 2: caixa de diálogo de informação

Se clicar em **Confirm or Unconfirm Settings** (Confirmar ou desconfirmar definições) durante outras fases da administração do tratamento, o Desktop Pro™ cancela o feixe carregado e envia as MU administradas do segmento actual para o MOSAIQ®. Se o feixe administrado for um feixe de vários segmentos, o Desktop Pro™ apenas envia o MU para o segmento actual para o MOSAIQ®. Por conseguinte, o Desktop Pro™ envia todos os segmentos anteriores que foram enviados para o MOSAIQ® com 0 MU.

Daí resulta que seja apresentado um aviso no MOSAIQ® (ver Figura 1) que lhe solicita, erradamente, para administrar novamente as MU para os segmentos anteriores.

Se clicar em **Yes** (Sim), o MOSAIQ® envia um campo de conclusão para o Desktop Pro™, para as MU que o MOSAIQ® identifica erradamente como não administrados. Esta situação pode originar um tratamento inadequado, uma vez que o campo de conclusão inclui o MU a administrar mas também os MU dos segmentos anteriores.

Se clicar em **No** (Não), o MOSAIQ® regista apenas o MU administrado para o segmento actual. Será então necessário registar manualmente o tratamento e as MU administradas para os segmentos anteriores no MOSAIQ®. Poderá então administrar correctamente as restantes MU.

Para evitar tratamentos inadequados ou registos incorrectos no MOSAIQ®, não clique em **Confirm or Unconfirm Settings** (Confirmar ou desconfirmar definições) na caixa de diálogo **Preset Selection** (Predefinir selecção) no XVI, até que o Desktop Pro™ apresente o estado da máquina **Preparatory** (Preparatório).

Com os melhores cumprimentos,

██████████

Director de aplicações de radioterapia